

Equine LTS Supreme

1. Lade diese App herunter: <https://apps.apple.com/dk/app/banlanx/id1508309620?l=da>
2. Um deine Supreme einzuschalten, drücke die Taste „I“ am Akku.
3. Öffne die App und tippe oben rechts auf das „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“. Wähle deine Supreme aus. Sie erscheint nun unter „Geräte“, was bedeutet, dass dein Handy mit deiner Supreme verbunden ist.
4. Du kannst deine Supreme jetzt über die App steuern.
5. Denke immer daran, deine Supreme am Akku ein- und auszuschalten – nicht über die App. Wenn der Akku dauerhaft eingeschaltet bleibt, entlädt er sich schnell. Die App dient nur zur Steuerung der Lichter, solange deine Supreme eingeschaltet ist.
6. Wenn du deine Supreme ausschaltest, merkt sie sich das zuletzt gewählte Programm bzw. die Farbe und startet beim nächsten Einschalten mit denselben Einstellungen.

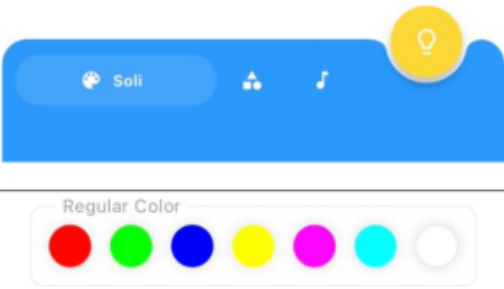
Blaues Licht: Hat eine antibakterielle Wirkung und ist gut für Wunden und andere Hautprobleme.

Rotes Licht: Ist gut zur Behandlung der Muskeln, reduziert Schmerzen und Steifheit und eignet sich zum Aufwärmen vor dem Training sowie zur schnelleren Regeneration danach.

Infrarotlicht: Dringt am tiefsten in das Gewebe ein und ist daher besonders gut für Sehnen und Bänder geeignet. Es fördert den Heilungs- und Regenerationsprozess.

Pulsierender Effekt: Durch das Pulsieren können – laut wissenschaftlicher Dokumentation – die Photonen tiefer in die Zellen eindringen.

Verschiedene Einstellungen in der App:


	<p>Tap on the 💡 to choose between the different colors/frequencies.</p> <p>The button in the middle you will get to a menu where you can do different programs, which gives the opportunity to use pulsing,</p> <p>Here you can control the color/frequencies of your Supreme.</p> <ul style="list-style-type: none">❤️: Your Supreme will only use infrared.♥️: Your Supreme will only use red.♥️: Your Supreme will only use blue.♥️: Your Supreme will only use red.♥️: Your Supreme will only use blue♥️: Your Supreme will use all three frequencies (blue, red and infrared) at the same time.
---	---

Tippe auf das ⓘ-Symbol, um zwischen den verschiedenen Farben/Frequenzen zu wählen.

Über die mittlere Taste gelangst du in ein Menü, in dem du verschiedene Programme auswählen kannst – darunter auch den Pulsmodus.

Hier kannst du die Farbe bzw. Frequenz deiner Supreme steuern:

- ⓘ Deine Supreme verwendet nur Infrarotlicht.
- ⓘ Deine Supreme verwendet nur rotes Licht.
- ⓘ Deine Supreme verwendet nur blaues Licht.
- ⓘ Deine Supreme verwendet nur rotes Licht.
- ⓘ Deine Supreme verwendet nur blaues Licht.
- ⓘ Deine Supreme verwendet alle drei Frequenzen (blau, rot und infrarot) gleichzeitig.

	<p>11 Red comet. Program with pulsing effect of infrared light 12 Green comet. Program with pulsing effect of red light. 13 Blue comet. Program with pulsing effect of blue light. 17 Whiter comet. Program with pulsing effect of both infrared, blue and red light at the same time.</p> <p>For all programs above, set the speed to 10 and the effect length to 25.</p> <p>If you tap on the ⓘ you can remove programs from the menu "Favorite". Tap on the ♥ when you are on the program that you want to save under "Favorite", so that it's always easy to find.</p>
--	--

Programmeinstellungen:

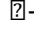
11 Roter Komet – Programm mit pulsierendem Effekt von Infrarotlicht.

12 Grüner Komet – Programm mit pulsierendem Effekt von Rotlicht.

13 Blauer Komet – Programm mit pulsierendem Effekt von Blaulicht.

17 Weißer Komet – Programm mit pulsierendem Effekt von Infrarot-, Rot- und Blaulicht gleichzeitig.

Für alle oben genannten Programme stelle die Geschwindigkeit auf 10 und die Effektlänge auf 25 ein.

Wenn du auf das -Symbol tippst, kannst du Programme aus dem Menü „Favoriten“ entfernen.

Tippe auf das , wenn du dich in einem Programm befindest, das du unter „Favoriten“ speichern möchtest, damit du es immer leicht finden kannst.